


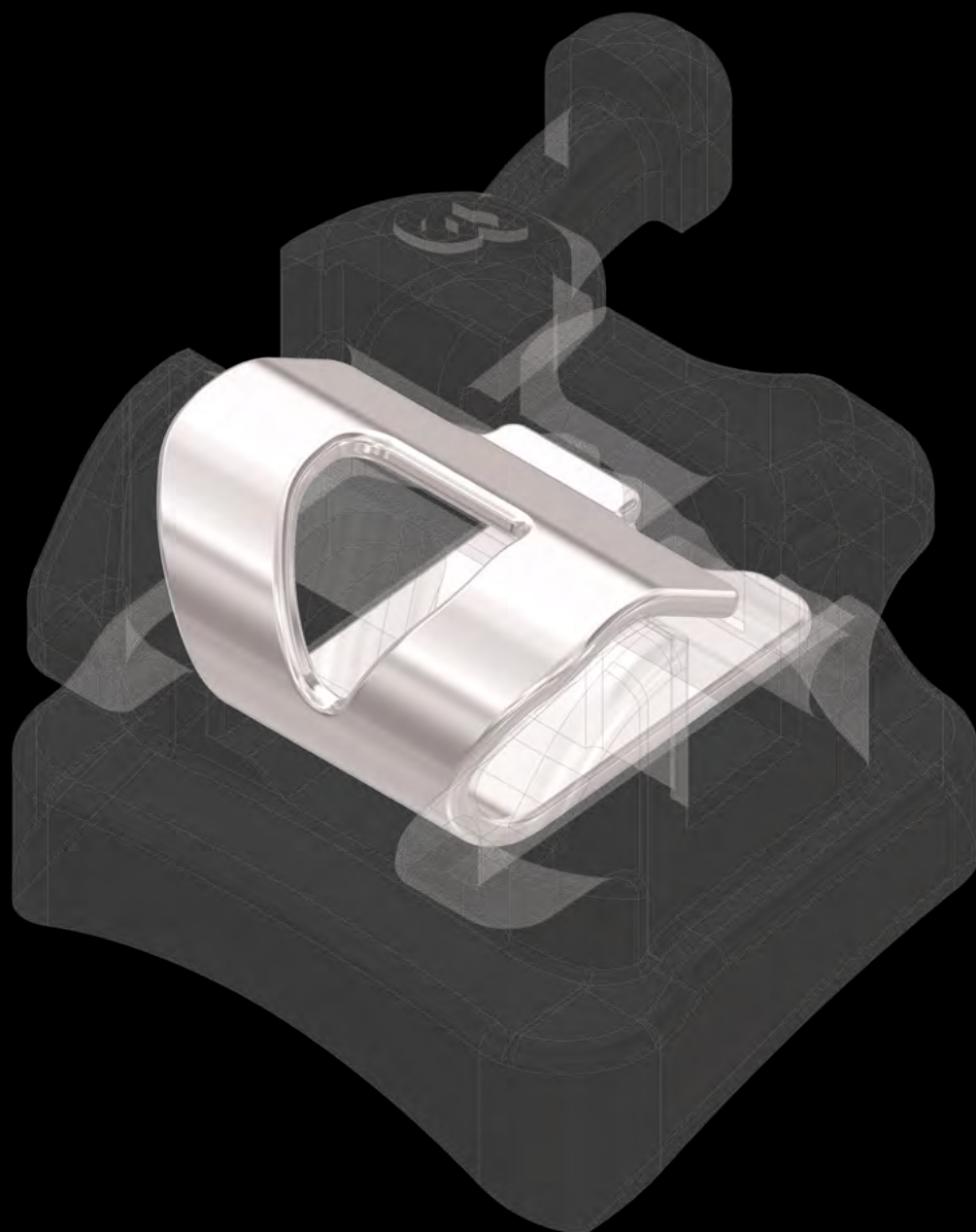

IT'S ALL ABOUT THE CLIP...

BioQuick®

Die 5. Generation


www.forestadent.com

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS


BioQuick®

It's all about the Clip...

bisheriger Clip

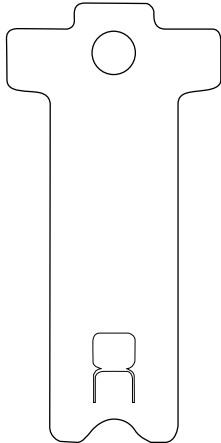

aktueller Clip

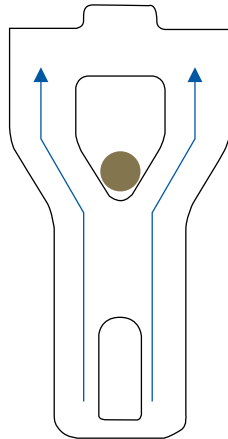

Der aktuelle Clip behält seine ursprüngliche Breite bei, wurde aber im stark beanspruchten Bereich optimiert und erweitert. Dadurch kann er mehr Kraft aufnehmen und verformt sich weniger.

Die Vorteile:

- Die größere Clip-Öffnung erlaubt ein einfacheres Öffnen mit Werkzeugen wie Sonde oder Scaler. Zudem haben wir ein neues Instrument für noch sichereres Öffnen entwickelt.
- Der Ansatzpunkt für die zum Öffnen notwendige Kraft wurde optimiert. Dadurch wird dafür weniger Kraft benötigt und gleichzeitig das Material weniger belastet.
- Das neue Clip-Design erlaubt eine größere nutzbare Slotbreite und ermöglicht damit eine bessere Rotations- und Angulationskontrolle, während das Bracket gleichzeitig kleiner wurde.
- Es gibt vier Clip-Varianten für verschiedene Bracket-Angulationen: das Bracket wird nun einfach und intuitiv entlang der Längsachse geöffnet.

Das Öffnen des neuen Clips erfolgt in Angulationsrichtung:



4. Generation



5. Generation

Mittenmarkierung bleibt in geöffnetem Zustand korrekt:



5. Generation



Alle Bestellinformationen zu BioQuick® in der jeweiligen Prescription.



IT'S ALL ABOUT THE CLIP...