

ORTHOeasy®



*Diseño, eficiencia y flexibilidad.
El sistema completo para anclajes esqueléticos.*

www.forestadent.com

FORESTADENT®
GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

ORTHOeasy® Pins

Anclaje esquelético simplificado

Los OrthoEasy® Pins disponen de un tornillo autoperforante y están codificados por colores para una rápida identificación de la longitud del tornillo. Los mini implantes vestibulares OrthoEasy® tienen una cabeza con diseño de bracket de doble slot cruz de .022" x .025" y una cavidad interior que permite usar alambres de hasta .019" x .025".





OrthoEasy® Pins



ORTHOeasy® Pal

El complemento inteligente del anclaje palatino

El sistema OrthoEasy® se complementa con OrthoEasy® Pal. Pal significa «palatino», ya que el nuevo mini implante ha sido desarrollado especialmente para el anclaje de aparatos de ortodoncia en el paladar. Permite fijar de forma más rápida y sencilla las ortodoncias para la ampliación del ancho del paladar y para la distalización o mesialización. La cabeza del OrthoEasy® Pal está provista de una rosca interior que permite fijar fácilmente los aparatos con tornillos de sujeción.

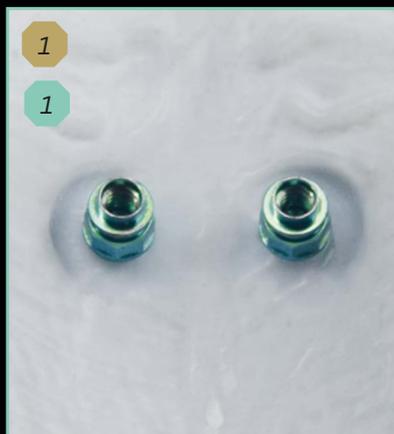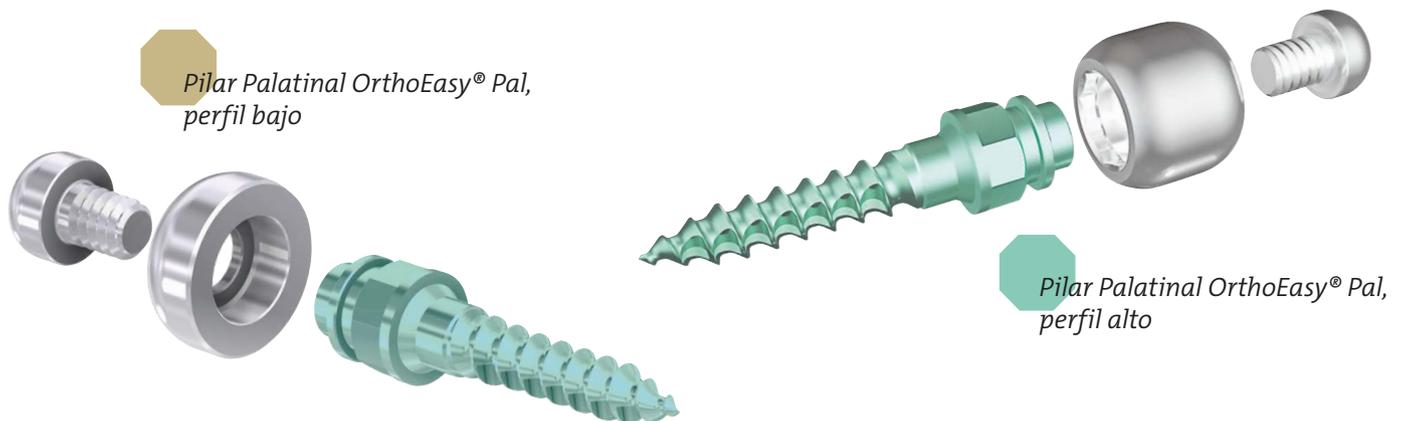

Fijación palatal de OrthoEasy® Pal.



En el cabezal del tornillo se coloca un pilar sobre el que se suelda el aparato.



El aparato se fija a la cabeza del OrthoEasy® Pal mediante un tornillo.

El diseño de la punta de la rosca ofrece un paso seguro y fácil a través de la encía y las corticales.

Los cortes intermedios en la rosca proporcionan mayor estabilidad en el anclaje.

OrthoEasy® Pin

El cuello cónico transgingival del tornillo sella la encía contra infecciones.

Una cabeza innovadora y longitudes codificadas por color para todas sus necesidades de anclaje ortodóntico.

Punto de compresión del mini-implante en el cortical para proporcionar alta estabilidad a través de la compactación mecánica.

OrthoEasy® Pal



Anclaje fácil de los aparatos en el cabezal de tornillo.

Ventajas de los miniimplantes OrthoEasy®



Una gama de tornillos reducida pero que cubre la mayoría de las formas de tratamiento




No requiere un gran número de instrumentos de inserción



Inserción autoperforante



Par de inserción armónico gracias a las socavaduras de la rosca similar a los dientes de tiburón

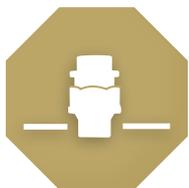


Estabilidad primaria gracias a un punto de compresión en el último paso de la rosca



Posibilidades de acoplamiento versátiles gracias al meticuloso diseño de la cabeza



Buen agarre del instrumento de inserción debido a la cabeza octogonal que ofrece más superficie de contacto

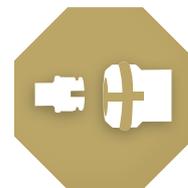

Control óptimo de la posición de la ranura durante la inserción debido al marcado láser en la punta de la extensión



Mayor comodidad del paciente gracias a la altura vertical reducida de la cabeza



Más fácil de distinguir gracias a la codificación por color



Biocompatible debido a la aleación de titanio de grado 5



Otras ventajas de OrthoEasy® Pal
Sujeción fiable del aparato con el miniimplante mediante tornillos de fijación

Los accesorios de OrthoEasy®



El brazo de fuerza ejerce fuerza a la misma altura del centro de resistencia y es aplicable para retracción en masa y deslizamientos mecánicos.



Pilares palatales para un fácil acoplamiento de los aparatos fabricados en laboratorio en los pins OrthoEasy® Pal (por ejemplo, los aparatos Frog y GNE).



El Space jet permite de manera segura, rápida y suave el cierre de espacios con un mínimo input clínico.





El enderezador de molares para un anclaje directo del pin.



El sistema de deslizamiento permite de forma simple y guiada, mesializaciones o distalizaciones de los dientes.

Accesorios

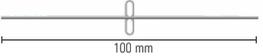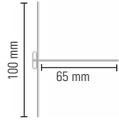Order No.		Descripción	Contenido	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1299-0100		Placa de fijación con alambre paralelo (ø 1,1 mm)*	1	-	
1299-0101		Placa de fijación con alambre ortogonal (ø 1,1 mm)*	1	-	
1299-0102		Placa de fijación, alambre en forma de "T" (ø 1,1 mm)*	1	-	
322-0110		SmartJet™ Tube, control deslizante distal-mesial	1	-	
322-0120		Destornillador de laboratorio SmartJet™	1	-	
322-0121		Hoja SmartJet™ para destornilladores dinámicos	1	-	
1299-0007		Dinamometro para tornillo de fijación, límite 10 Ncm	1	-	
A167D1639		Tornillos para Frog II	1	-	
100-0009		Llaves rotativa	1	-	
307-1012		Resorte Memory Titanol para enderezador de molares	.018" x .025" (Slot .022")	10	
307-1010			.016" x .022" (Slot .018")		
307-1060		Power-Arm .018"	10		-
307-1065		Power-Arm .022"			
307-1070		Space Jet	2		-

*elemento de fijación de longitud 13.5 mm

ORTHOeasy®

OrthoEasy® & OrthoEasy® Pal Pins no estéril

Order No.		Tamaño	Contenido	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1101A2306		6 mm	6 x 1,7 mm Slot .022"	5	-
1101A2308		8 mm	8 x 1,7 mm Slot .022"	5	-
1101A2310		10 mm	10 x 1,7 mm Slot .022"	5	-
1201A2308		8 mm	8 x 1,7 mm	-	

OrthoEasy® & OrthoEasy® Pal Pins estéril


Order No.		Tamaño	Contenido	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1101S2306		6 mm	6 x 1,7 mm Slot .022"	5	-
1101S2308		8 mm	8 x 1,7 mm Slot .022"	5	-
1101S2310		10 mm	10 x 1,7 mm Slot .022"	5	-
1201S2308		8 mm	8 x 1,7 mm	-	

Productos básicos

Order No.		Descripción	Contenido	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1199-0006		Extensión corta OrthoEasy® 10 mm – octagonal para destornillador	1		-
1199-0015		Extensión larga OrthoEasy® 45 mm – octagonal para destornillador	1		-
1199-0007		Extensión OrthoEasy® 5 mm – octagonal para instrumento de mano	1		
1199-0008		Extensión OrthoEasy® 10 mm – octagonal para instrumento de mano	1		
1199-0002		Mango OrthoEasy® para destornillador	1		-
1299-1001		Análogo de laboratorio OrthoEasy® Pal	1	-	
1299-1003		Tornillo de fijación para OrthoEasy® Pal	10	-	
1299-1004		Pilar Palatinal OrthoEasy® Pal , perfil bajo	10	-	
1299-1014		Pilar Palatinal OrthoEasy® Pal , perfil alto	10	-	
1299-1005		Casquillo de impresión OrthoEasy® Pal	10	-	
1299-1006		Extensión OrthoEasy® Pal para pieza de mano	1	-	

Productos opcionales


Order No.		Descripción	Contenido	OrthoEasy®	OrthoEasy® Pal
1199-0000		Caja OrthoEasy® (sin accesorios ni tornillos) para mini implantes e instrumentos OrthoEasy®	1		
1299-1007		Pieza de giro manual para pieza de mano	1	-	

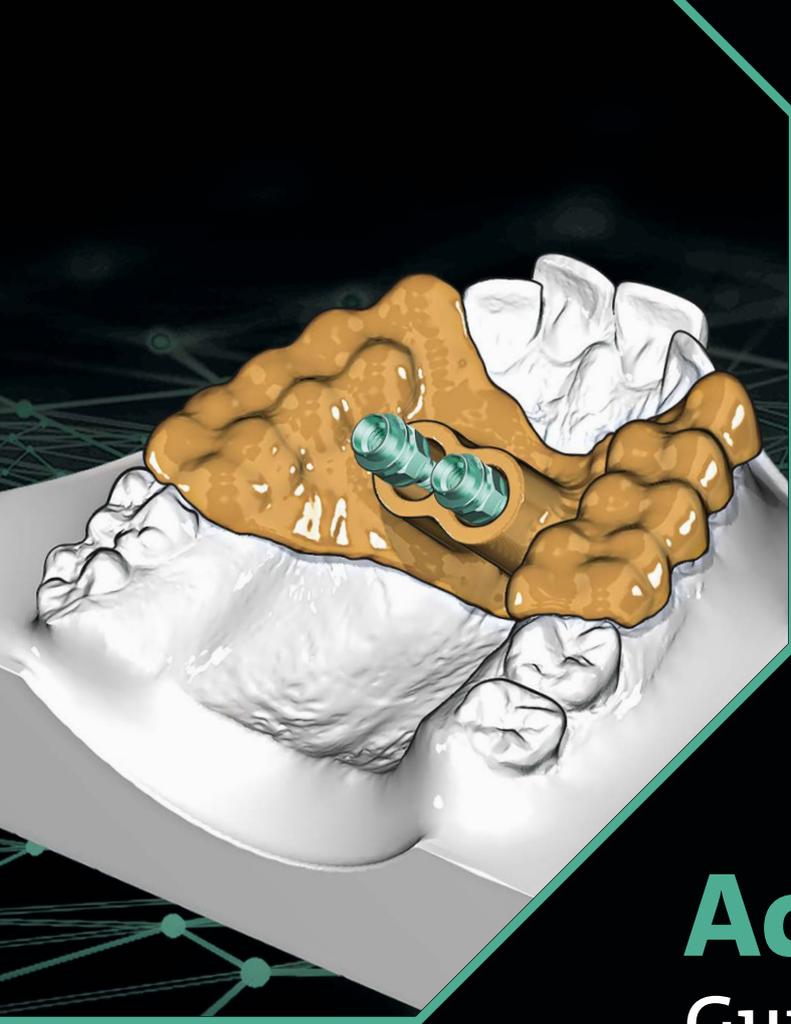

Accuguide[®]

Guía de inserción

para una inserción guiada de los
minitornillos OrthoEasy[®]

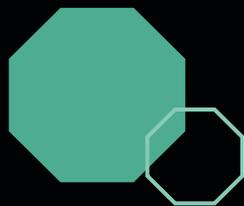

FORESTADENT SLU (España)

Oficina Madrid:

General Rodrigo 6

Edificio Germania, 7ª Planta

E-28003 Madrid

Phone: +34 915 34 55 53 (directo)

Phone: +34 915 33 16 17 (oficina)

Fax: +34 915 33 15 67

forestadent@forestadent.es

FORESTADENT (Germany)

Bernhard Förster GmbH

Westliche Karl-Friedrich-Str. 151

75172 Pforzheim

Phone: +49 (0) 7231 459-0

Fax: +49 (0) 7231 459-102

info@forestadent.com

www.forestadent.com


GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS